

CLATUU α



Meest geavanceerde cryolipolyse apparaat

Vacuüm en 360° koeling

Zeven verschillende behandelkoppen

Constance koeling tot -9°C



Cryolipolyse, **de techniek**



Tegenwoordig stijgt de vraag van uw klanten naar diverse afslanktechnieken. Cryolipolyse is inmiddels één van de populairste behandelingen op de markt. Deze geavanceerde techniek is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vet en bodycontouring. In een markt waar veel aanbieders zijn, is het lastig om te ondervinden welke apparaten wél werken en welke niet

Eenvoudig uitgelegd is cryolipolyse een techniek waarbij vet wordt vernietigd door bevroering. Het is wetenschappelijk bewezen dat bevroering een veilige en effectieve manier is om vet te verwijderen. Om vetcellen daadwerkelijk af te kunnen breken (apoptose), moeten de vetcellen een temperatuur beneden 9 graden Celsius bereiken. Om deze lage temperatuur te bereiken heb je een krachtig apparaat nodig.

De Clatuu Alpha onderscheidt zich van andere apparaten en is het meest geavanceerde cryolipolyse apparaat. Waarom? Dat gaan wij je in deze brochure vertellen!

Voorgaande methoden

360° omringde koelingstechnologie

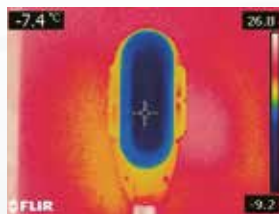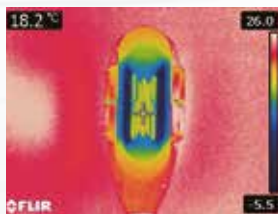

360° koeling en vacuüm

Veel cryolipolyse apparaten koelen alleen de onder- of bovenkant. Op deze manier wordt echter niet het gewenste resultaat behaald, omdat er koude lucht verloren gaat en hierdoor de cellen niet bereikt. De Clatuu Alpha maakt gebruik van een sterk vacuüm zodat de huid en het vet goed in de behandelkop gezogen worden. Vervolgens wordt de lichaamszone rondom gekoeld, door middel van 360-graden-technologie, zodat het hele gebied dezelfde diepe koeling krijgt. De kou vervliegt op deze manier niet, waardoor er een optimaal resultaat gecreëerd wordt.

18.1%
Effectiever resultaat

Vet bevroering in **vijf stappen:**




Je kent het: je leeft gezond, maar blijft op sommige plekken hardnekkig vet houden. Dit hardnekkige vet kan verwijderd worden.




Het hardnekkige vet wordt gecreëerd door vetcellen die zich in jouw lichaam bevinden.



Het handstuk zuigt de huid vacuüm en koelt deze tot -9 graden Celsius op de huid. De vetcellen zullen bevriezen.

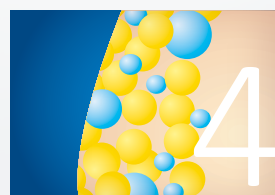

Het lichaam zal de vetcellen als overbodig beschouwen, natuurlijk afbreken en afvoeren. Dit proces wordt apoptose genoemd.

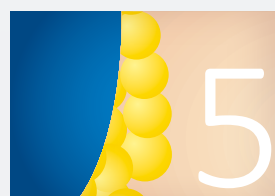

De vetcellen die zijn afgebroken door het lichaam zullen niet meer terugkomen. Hierdoor wordt het vet in het behandelde gebied gereduceerd.



Het uiteindelijke resultaat is dat het hardnekkige vet wordt verwijderd en het rolletje verdwijnt. >>>

Automatische parameters

De Clatuu Alpha is erg fijn in gebruik, omdat het apparaat zelf de aanbevolen parameters per behandelkop instelt. Dit zorgt ervoor dat de parameters worden afgesteld op het lichaamsdeel, zodat er optimale resultaten behaald kunnen worden.



20%

Meer zuigkracht

Sneller het doel bereiken

Het koelingssysteem van de Clatuu Alpha zorgt ervoor dat de lage temperatuur sneller bereikt worden. Dit zorgt ervoor dat de behandel tijden korter worden en je meer klanten per dag behandelen. Voor de klanten is het fijn, omdat een behandeling minder lang duurt en ze sneller weer verder kunnen.

Persoonlijke behandelingen

De behandelkoppen van de Clatuu Alpha hebben de mogelijkheid om tot 20% meer vacuüm te zuigen, waardoor er betere resultaten worden behaald. Het verschilt echter per klant hoe laag de temperatuur en hoe hard het vacuüm moet zijn. Dit is instelbaar. Zo kunnen er comfortabele en persoonlijke behandelingen worden aangeboden.





Rug

BH
uitpuilingen

Buik

Zij

Lovehandles

Heup

Dij

Wat je kunt behandelen met de **Clatuu Alpha**

Zeven verschillende behandelkoppen

Wat de Clatuu Alpha eveneens uniek maakt, is dat er gebruik gemaakt kan worden van zeven verschillende behandelkoppen. Voor elk lichaamsdeel is er een kop die perfect past, waardoor het vacuüm en de koeling nog beter hun werk kunnen doen. Er is o.a. een behandelkop voor de buik en voor de onderkin.



Wing mini

Onderkin, oksel en knieën

Flat mini

Onderkin, oksel en knieën

Flat

Buik, armen en heupen

Wing

Buik, zij, lovehandles

Wing plus

Bh-uitstulpingen, zij, lovehandles en billen

Arc-T

Bovenbenen en heupen

Wing max

Buik



Twee zones tegelijk behandelen

Een andere unieke eigenschap van de Clatuu Alpha is dat het apparaat jou de mogelijkheid geeft om twee zones tegelijk te behandelen. De twee koppen zorgen ervoor dat dit kan worden gedaan zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de behandeling. Op deze manier gaan de behandelingen sneller en kun je meer klanten helpen op één dag.

Constante koeling van -9°C

Het is essentieel om een diepe koeling te bereiken bij cryotherapie, omdat alleen dan een optimaal resultaat wordt behaald. Waar andere apparaten stopen bij -4°C, biedt de krachtige Clatuu Alpha een koeling van maar liefst -9°C. Het apparaat houdt deze koeling constant vast, waardoor er vaak na één behandeling al een goed resultaat zichtbaar is.

De handstukken zijn eenvoudig te verwisselen



Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor de behandeling van jouw klanten?

Neem dan contact op met **Laservision** of kijk op **www.laservision.nl**





Hoe onderscheid jij je in de markt?

Zoals eerder beschreven, zijn er veel verschillende apparaten beschikbaar op de markt. Hiervan is het overgrote deel totaal niet effectief. Maar hoe kun jij je dan onderscheiden met een goed apparaat?

Consumenten vinden het belangrijk om behandeld te worden met een apparaat dat optimale resultaten haalt. Daarnaast willen ze behandeld worden door een deskundige behandelaar. Vooral dit laatste punt is waar de Belgische schoonheidsspecialisten zich kunnen onderscheiden van andere aanbieders. Inhoudelijk theoretische en praktische kennis, inzicht in aanvullende technieken voor een beter resultaat en bewustzijn rondom contra-indicaties kunnen veel waarde toevoegen voor een consument.

Allereerst is het belangrijk om de consumenten de bewezen resultaten te laten zien. Daarnaast voegt het een extra toe om je consumenten te informeren over de techniek, het apparaat en jouw deskundigheid. Uiteraard wil Medilaser jou helpen – wij hebben veel marketing materiaal beschikbaar zodat jij die kunt delen met jouw klanten.

Specificaties

Energietype:	Cryolipolyse
Aansluiting:	200-240 Volt, 50/60 hz
Energieverbruik:	1250 VA
Display:	10,4" LCD touchscreen
Display handstukken:	4,3" LCD touchscreen
Afmetingen:	490 x 715 x 1.140 mm (B x D x H)
Gewicht:	92 kilo
Uitvoering:	Verrijdbaar door middel van 4 grote zwenkwielen



WWW.MEDILASER.BE